

MADE IN
EUROPE




This product has been developed and manufactured using both raw materials and with production in Europe.

Choose quality, save money, and protect the environment.


(IS) Leiðbeiningar

05_20240602_IS

Quick On

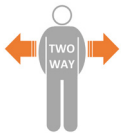

MC 002-1952

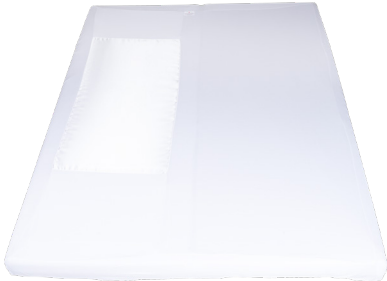

MC 002-1958




MC 002-1957



MC 003-1952



Reglugerð MDR 2017/745 fyrir lækningatæki, flokkur 1

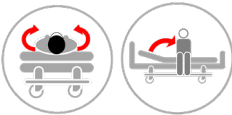

Grein nr.	HMI no.	Nafn - Stærð	UDI-DI/GTIN
☐ MC 002-1952	80337	Quick ON Stretch - 80	5744001972168
☐ MC 002-1953	80351	Quick ON Box Stretch - 80	5744001972172
☐ MC 002-1954	81111	Quick ON Stretch - 120	5744001972182
☐ MC 002-1955	81108	Quick ON Box Stretch - 120	5744001972199
☐ MC 002-1956	81109	Quick ON Stretch - 150	5744001972205
☐ MC 002-1957	81110	Quick ON Box Stretch - 150	5744001972212
☐ MC 002-1958	100634	Quick ON Stretch Left - 160	5744001972229
☐ MC 002-1959	104990	Quick ON Stretch - 180	5744001972236
☐ MC 002-1960	104991	Quick ON Stretch - 200	5744001972243
☐ MC 002-1961	104989	Quick ON Stretch - 105	5744001972250
☐ MC 003-1952	104973	Quick On Stretch Inco - 80	5744001972434
☐ MC 003-1954	109195	Quick On Stretch Inco - 120	5744001972441

ISO 12 31 03 21

The Original Nordic
Human Handling Concept



Developed &
Manufactured by:



Takk fyrir að velja vöru frá master care A/S.

Við mælum með að þú kynnis þér þessar leiðbeiningar vandlega áður en þú notar vöruna.

Upplýsingarnar með leiðbeiningunum eiga við um viðkomandi vörur, að því tilskildu að þeim hafi ekki verið breytt eða sérsníðnar, og að þær hafi verið notaðar eins og mælt er með í þessum leiðbeiningum. Ef viðskiptavinur breytir, gerir við eða notar vöruna í öðrum tilgangi en Master Care A/S ráðleggur, gildir CE - vottunin ekki lengur og ábyrgðin fellur úr gildi.

Ef vafaatriði koma upp, hafðu samband við Master Care A/S.

MDR (EU) 2017/745:

Vörur með þessum leiðbeiningum eru CE- vottaðar og fylgja samræmdum stöðlum. Þetta þýðir að vörurnar eru í samræmi við nauðsynlegar heilbrigðis- og öryggistilskipanir, og fylgja stöðlum í reglugerð um lækningatæki MDR (ESB) 2017/745 – Class 1.

Tilætluð notkun vörunnar:

Varan dregur úr núningi undir bolnum við hliðarfærslur og snúning í rúminu. Hentar notendum með verki og/eða skerta hreyfigetu í mjöðm, grindarholi og/eða baki.

Rétt notkun vörunnar:

Varan er hönnuð til notkunar á svamp- eða boxdýnu. Hún dregur úr núningi undir bók, við hliðarfærslur og snúning í rúminu.

Frábendingar:

Ef varan minnkar ekki nægilega núning við flutning skal íhuga að skipta um snúningshjálpartæki. Það eru engar aðrar frábendingar við notkun vörunnar.

Áhættumat:

Gerðu alltaf áhættu- og færnimat á notandanum áður en varan er

notuð. Þannig er notkun vörunnar, í þeim tilgangi að flytja eða færa notanda, bæði skilvirkari og traustari.

Þekking á vöru/flutningi:

Mikilvægt er að notandi vörunnar hafi fengið réttar upplýsingar um notkun hennar og lesið leiðbeiningar vandlega áður en varan er notuð. Master Care veitir fræðslu á heimasíðu sinni, og þar er að finna allar leiðbeiningar fyrir vörur okkar.

Líftími:

Áætlaður líftími vöru, með daglegu sliti og þvotti er að meðaltali 2-5 ár. Líftími vörunnar fer eftir notkun og álagi, ásamt því hversu oft hún er þvegin og þurrkuð. Vörur án nælon renniefnis hafa mun lengri líftíma.

Farga skal vörum með ófullnægjandi núningsgetu, gallaða sauma, brotið efni eða aðra annmarka. Þannig má ávallt stuðla að traustara vinnuumhverfi fyrir aðstoðarmanneskju og notanda. Athugið ástand vörunnar sem oftast og helst fyrir hverja notkun.

Ábyrgð:

Master Care A/S veitir 2 ára ábyrgð sem nær yfir efnisog framleiðslugalla, ef varan hefur verið notuð á réttan hátt.

Óviljandi mistök og meiðsli vegna rangrar notkunar á vörunni:

Ávallt skal tilkynna mistök til viðeigandi yfirvalda, til master care A/S eða dreifingaraðila.

master care A/S tekur enga ábyrgð á líkamsmeiðslum eða vörutjóni, ef varan hefur ekki verið notuð í samræmi við yfirlýstan tilgang eða samkvæmt notkunarleiðbeiningum framleiðanda.



Leiðbeiningar - Quick On

Quick ON lakinu komið fyrir:



1. Settu lakið þannig á að merkingin "This side up" snúi að höfðalaginu.



2. Settu Quick On ofan á dýnuna og brettu teygju-lakið niður fyrir hornin.



3. Quick On hefur nú verið komið fyrir á dýnunni.

Að snúa sér í rúminu :



4. Notandinn beygir hægri fótinn, eða báða fætur og grípur um rúmgrindina á gagnstæðri hlið með hægri hendi, eða öfugt til að snúa á hina hliðina.



5. Notandinn getur nú fært mjaðir/ bak aftur og auðveldlega rennt sér á hliðina með því að toga með hægri hendi og rétta úr fótleggnum.

Að færa sig yfir í sitjandi stöðu á brún rúmsins:



6. Notandi snýr sér í hliðarliggjandi stöðu við brún rúmsins. Því næst lyftir hann höfðalagi rúmsins.



7. Notandinn þrýstir með höndum að höfuðenda rúmsins og rennir fótunum samtímis fram yfir brún rúmsins til að komast í sitjandi stöðu.

Leiðbeiningar - Quick On

Tæknilegar upplýsingar

Efni:

Bómull og pólýester

Grein nr. - Heiti vöru:	Stærð:	Stærð snúningsflatar:	Hámarkshæð:	Hámarks þyngd notanda:	Vöruþyngd:
MC 002-1952 Quick ON Stretch - 80	L 200 x B 80 x H 30 cm	L 110 x B 60 cm	Ekki við	180 kg	0,68 kg
MC 002-1953 Quick ON Box Stretch - 80	L 200 x B 80 x H 50 cm	L 110 x B 60 cm	Ekki við	180 kg	0,86 kg
MC 002-1954 Quick ON Stretch - 120	L 200 x B 120 x H 30 cm	L 110 x B 100 cm	Ekki við	180 kg	0,82 kg
MC 002-1955 Quick ON Box Stretch - 120	L 200 x B 120 x H 50 cm	L 110 x B 100 cm	Ekki við	180 kg	1,02 kg
MC 002-1956 Quick ON Stretch - 150	L 200 x B 150 x H 30 cm	L 110 x B 130 cm	Ekki við	180 kg	0,94 kg
MC 002-1957 Quick ON Box Stretch - 150	L 200 x B 150 x H 50 cm	L 110 x B 130 cm	Ekki við	180 kg	1,20 kg
MC 002-1958 Quick ON Stretch Left - 160	L 200 x B 160 x H 50 cm	L 110 x B 60 cm	Ekki við	180 kg	1,14 kg
MC 002-1959 Quick ON Stretch - 180	L 200 x B 180 x H 30 cm	L 110 x B 160 cm	Ekki við	180 kg	1,20 kg
MC 002-1960 Quick ON Stretch - 200	L 200 x B 200 x H 30 cm	L 110 x B 180 cm	Ekki við	180 kg	1,20 kg
MC 002-1961 Quick ON Stretch - 105	L 200 x B 105 x H 30 cm	L 110 x B 95 cm	Ekki við	180 kg	0,80 kg
MC 003-1952 Quick On Stretch Inco - 80	L 200 x B 80 x H 30 cm	L 110 x B 60 cm	Ekki við	180 kg	1,20 kg
MC 003-1954 Quick On Stretch Inco - 120	L 200 x B 120 x H 30 cm	L 110 x B 100 cm	Ekki við	180 kg	1,30 kg

Viðvörðun



Aldrei má skilja notanda eftir á lakinu ef hann liggur við brún rúmsins ef það er hætt á að hann renni út úr rúminu.



Aldrei má skilja vöruna eftir á gólfi.



Ávallt skal aðgæta hvort bremsur á rúminu séu virkar áður en notandinn er færður til.



CE- vottun:
Þessi vara er CE-vottuð og fylgir samræmdum stöðlum. Þetta þýðir að varan samræmist nauðsynlegum heilbrigðis- og öryggistilskipunum. Varan er í samræmi við staðla á lækningatækjum, reglugerð (ESB) 2017/745 - flokkur 1.



Þyngd notanda:

Ráðlögð hámarksþyngd notanda: 180 kg.



Þvottur:

Vöruna má þvo í þvottavél við hámark 85°C. Mælt er með mildum þvotti og að lakið sé hengt upp til þerris sem mun lengja líftíma þess verulega.



pH-gildi þvottaefnis:

Þessi vara þolir þvotta- og sótthreinsiefni með pH gildi á milli 5-9.



Mýkingarefni:

Aldrei skal nota mýkingarefni við þvott, þar sem það dregur verulega úr rennieiginleikum.



Þurrkun:

Þessa vöru má aðeins þurrka í þurrkara við hámark 40°C. Mælt er með að hengja lakið upp til þerris sem mun lengja líftíma vörunnar.



Hreinsun yfirborðs:

Yfirborð vörunnar má hreinsa með blautum klút og sápu.



Sótthreinsiefni:

Þessi vara þolir sótthreinsiefni með alkóhóli ef pH gildi er á milli 5-9.



Straujun:

Ekki má strauja vöruna.



Þurrhreinsun:

Ekki má þurrhreinsa vöruna.



Klór:

Ekki má nota klór á vöruna.



Viðhald:

Athuga skal ástand vörunnar reglulega og helst fyrir hverja notkun. Aðgætið hvort lakið sé rífið, saumar séu í lagi o.s.v.frv. Farga skal vöru sem er mjög slitin eða aðra galla.



Leiðbeiningar:

Ávallt skal lesa leiðbeiningar vandlega áður en varan er notuð.



Förgun:

Ávallt skal fylgja staðbundnum reglum þegar vörnunni er fargað.

Finna okkur á:



master-care.dk