

MADE IN EUROPE



This product has been developed and manufactured using both raw materials and with production in Europe.

Choose quality, save money, and protect the environment.


(IS) Leiðbeiningar

Quick On

05_20250115_IS



MC 002-1952

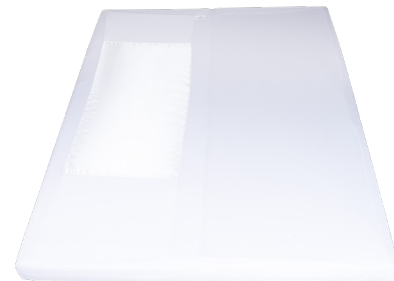

MC 002-1958




MC 002-1957



MC 003-1952



Reglugerð MDR 2017/745 fyrir lækningatæki, flokkur 1

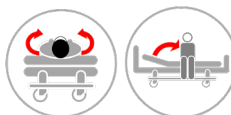

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

REF (Grein Ei.)

MC 002-1952
MC 002-1953
MC 002-1954
MC 002-1955
MC 002-1956
MC 002-1957
MC 002-1958
MC 002-1959
MC 002-1960
MC 002-1961
MC 002-1964
MC 003-1952
MC 003-1954

HMI Ei.

80337
80351
81111
81108
81109
81110
100634
104990
104991
104989
144504
104973
109195

Nafn - Stærð

Quick ON Stretch - 80
Quick ON Box Stretch - 80
Quick ON Stretch - 120
Quick ON Box Stretch - 120
Quick ON Stretch - 150
Quick ON Box Stretch - 150
Quick ON Stretch Left - 160
Quick ON Stretch - 180
Quick ON Stretch - 200
Quick ON Stretch - 105
Quick On - 90
Quick On Stretch Inco - 80
Quick On Stretch Inco - 120

UDI-DI/GTIN

05744001972168
05744001972172
05744001972182
05744001972199
05744001972205
05744001972212
05744001972229
05744001972236
05744001972243
05744001972250
05744001975237
05744001972434
05744001972441

ISO 12 31 03 21

The Original Nordic
Human Handling Concept



SCAN ME

Developed &
Manufactured by:



master-care.dk

Takk fyrir að velja vöru frá master care A/S.

Við mælum með að þú kynnis þér þessar leiðbeiningar vandlega áður en þú notar vöruna.

Upplýsingarnar með leiðbeiningunum eiga við um viðkomandi vörur, að því tilskildu að þeim hafi ekki verið breytt eða sérsníðnar, og að þær hafi verið notaðar eins og mælt er með í þessum leiðbeiningum. Ef viðskiptavinur breytir, gerir við eða notar vöruna í öðrum tilgangi en Master Care A/S ráðleggur, gildir CE - vottunin ekki lengur og ábyrgðin fellur úr gildi.

Ef vafaatriði koma upp, hafðu samband við Master Care A/S.

MDR (EU) 2017/745:

Vörur með þessum leiðbeiningum eru CE- vottaðar og fylgja samræmdum stöðlum. Þetta þýðir að vörurnar eru í samræmi við nauðsynlegar heilbrigðis- og öryggistilskipanir, og fylgja stöðlum í reglugerð um lækningatæki MDR (ESB) 2017/745 – Class 1.

Tilætluð notkun vörunnar:

Varan dregur úr núningi undir bolnum við hliðarfærslur og snúning í rúminu. Hentar notendum með verki og/eða skerta hreyfigetu í mjöðm, grindarholi og/eða baki.

Rétt notkun vörunnar:

Varan er hönnuð til notkunar á svamp- eða boxdýnu. Hún dregur úr núningi undir bók, við hliðarfærslur og snúning í rúminu.

Frábendingar:

Ef varan minnkar ekki nægilega núning við flutning skal íhuga að skipta um snúningshjálpartæki. Það eru engar aðrar frábendingar við notkun vörunnar.

Áhættumat:

Gerðu alltaf áhættu- og færnimat á notandanum áður en varan er

notuð. Þannig er notkun vörunnar, í þeim tilgangi að flytja eða færa notanda, bæði skilvirkari og traustari.

Þekking á vöru/flutningi:

Mikilvægt er að notandi vörunnar hafi fengið réttar upplýsingar um notkun hennar og lesið leiðbeiningar vandlega áður en varan er notuð. Master Care veitir fræðslu á heimasíðu sinni, og þar er að finna allar leiðbeiningar fyrir vörur okkar.

Líftími:

Áætlaður líftími vöru, með daglegu sliti og þvotti er að meðaltali 2-5 ár. Líftími vörunnar fer eftir notkun og álagi, ásamt því hversu oft hún er þvegin og þurrkuð. Vörur án nælon renniefnis hafa mun lengri líftíma.

Farga skal vörum með ófullnægjandi núningsgetu, gallaða sauma, brotið efni eða aðra annmarka. Þannig má ávallt stuðla að traustara vinnuumhverfi fyrir aðstoðarmanneskju og notanda. Athugið ástand vörunnar sem oftast og helst fyrir hverja notkun.

Ábyrgð:

Master Care A/S veitir 2 ára ábyrgð sem nær yfir efnisog framleiðslugalla, ef varan hefur verið notuð á réttan hátt.

Óviljandi mistök og meiðsli vegna rangrar notkunar á vörunni:

Ávallt skal tilkynna mistök til viðeigandi yfirvalda, til master care A/S eða dreifingaraðila.

master care A/S tekur enga ábyrgð á líkamsmeiðslum eða vörutjóni, ef varan hefur ekki verið notuð í samræmi við yfirlýstan tilgang eða samkvæmt notkunarleiðbeiningum framleiðanda.



Leiðbeiningar - Quick On

Quick ON lakinu komið fyrir:



1. Settu lakið þannig á að merkingin "This side up" snúi að höfðalaginu.



2. Settu Quick On ofan á dýnuna og brettu teygju-lakið niður fyrir hornin.



3. Quick On hefur nú verið komið fyrir á dýnunni.

Að snúa sér í rúminu :



4. Notandinn beygir hægri fótinn, eða báða fætur og grípur um rúmgrindina á gagnstæðri hlið með hægri hendi, eða öfugt til að snúa á hina hliðina.



5. Notandinn getur nú fært mjaðir/ bak aftur og auðveldlega rennt sér á hliðina með því að toga með hægri hendi og rétta úr fótleggnum.

Að færa sig yfir í sitjandi stöðu á brún rúmsins:



6. Notandi snýr sér í hliðarliggjandi stöðu við brún rúmsins. Því næst lyftir hann höfðalagi rúmsins.



7. Notandinn þrýstir með höndum að höfuðenda rúmsins og rennir fótunum samtímis fram yfir brún rúmsins til að komast í sitjandi stöðu.

Leiðbeiningar - Quick On

Tæknilegar upplýsingar

REF - Heiti vöru:	Stærð:	Stærð snúningsflatar:	Hámarks þyngd notanda:	Sisältö:	Vöruþyngd:
MC 002-1952 Quick ON Stretch - 80	L 200 x B 80 x H 15 cm	L 110 x B 60 cm	180 kg	97% Polyesteri, 3% Spandex.	0,68 kg
MC 002-1953 Quick ON Box Stretch - 80	L 200 x B 80 x H 25 cm	L 110 x B 60 cm	180 kg	96% Polyesteri, 4% Spandex.	0,86 kg
MC 002-1954 Quick ON Stretch - 120	L 200 x B 120 x H 15 cm	L 110 x B 100 cm	180 kg	97% Polyesteri, 3% Spandex.	0,82 kg
MC 002-1955 Quick ON Box Stretch - 120	L 200 x B 120 x H 25 cm	L 110 x B 100 cm	180 kg	97% Polyesteri, 3% Spandex.	1,02 kg
MC 002-1956 Quick ON Stretch - 150	L 200 x B 150 x H 15 cm	L 110 x B 130 cm	180 kg	97% Polyesteri, 3% Spandex.	0,94 kg
MC 002-1957 Quick ON Box Stretch - 150	L 200 x B 150 x H 25 cm	L 110 x B 130 cm	180 kg	97% Polyesteri, 3% Spandex.	1,20 kg
MC 002-1958 Quick ON Stretch Left - 160	L 200 x B 160 x H 25 cm	L 110 x B 60 cm	180 kg	96% Polyesteri, 4% Spandex.	1,14 kg
MC 002-1959 Quick ON Stretch - 180	L 200 x B 180 x H 15 cm	L 110 x B 160 cm	180 kg	98% Polyesteri, 2% Spandex.	1,20 kg
MC 002-1960 Quick ON Stretch - 200	L 200 x B 200 x H 15 cm	L 110 x B 180 cm	180 kg	98% Polyesteri, 2% Spandex.	1,20 kg
MC 002-1961 Quick ON Stretch - 105	L 200 x B 105 x H 15 cm	L 110 x B 95 cm	180 kg	97% Polyesteri, 3% Spandex.	0,80 kg
MC 002-1964 Quick On - 90	L 200 x B 90 x H 15 cm	L 130 x B 70 cm	180 kg	97% Polyesteri, 3% Spandex.	0,76 kg
MC 003-1952 Quick On Stretch Inco - 80	L 200 x B 80 x H 15 cm	L 110 x B 60 cm	180 kg	5% Puuvilla, 85% Polyesteri, 8% Polyuretaani, 2% Spandex.	1,20 kg
MC 003-1954 Quick On Stretch Inco - 120	L 200 x B 120 x H 15 cm	L 110 x B 100 cm	180 kg	5% Puuvilla, 84% Polyesteri, 9% Polyuretaani, 2% Spandex.	1,30 kg

Viðvörðun



Aldrei má skilja notanda eftir á lakinu ef hann liggur við brún rúmsins ef það er hætt á að hann renni út úr rúminu.



Aldrei má skilja vöruna eftir á gólfi.



Ávallt skal aðgæta hvort bremsur á rúminu séu virkar áður en notandinn er færður til.



CE- vottun: Þessi vara er CE-vottuð og fylgir samræmdum stöðlum. Þetta þýðir að varan samræmist nauðsynlegum heilbrigðis- og öryggistilskipunum. Varan er í samræmi við staðla á lækningatækjum, reglugerð (ESB) 2017/745 - flokkur 1.



Þyngd notanda:

Ráðlögð hámarksþyngd notanda: 180 kg.



Þvottur:

Vöruna má þvo í þvottavél við hámark 85°C. Mælt er með mildum þvotti og að lakið sé hengt upp til þerris sem mun lengja líftíma þess verulega.



pH-gildi þvottaefnis:

Þessi vara þolir þvotta- og sótthreinsiefni með pH gildi á milli 5-9.



Mýkingarefni:

Aldrei skal nota mýkingarefni við þvott, þar sem það dregur verulega úr rennieiginleikum.



Þurrkun:

Þessa vöru má aðeins þurrka í þurrkara við hámark 40°C. Mælt er með að hengja lakið upp til þerris sem mun lengja líftíma vörunnar.



Hreinsun yfirborðs:

Yfirborð vörunnar má hreinsa með blautum klút og sápu.



Sótthreinsiefni:

Þessi vara þolir sótthreinsiefni með alkóhóli ef pH gildi er á milli 5-9.



Straujun:

Ekki má strauja vöruna.



Þurrhreinsun:

Ekki má þurrhreinsa vöruna.



Klór:

Ekki má nota klór á vöruna.



Viðhald:

Athuga skal ástand vörunnar reglulega og helst fyrir hverja notkun. Aðgætið hvort lakið sé rífið, saumar séu í lagi o.s.v.frv. Farga skal vöru sem er mjög slitin eða aðra galla.



Leiðbeiningar:

Ávallt skal lesa leiðbeiningar vandlega áður en varan er notuð.



Förgun:

Ávallt skal fylgja staðbundnum reglum þegar vörunni er fargað.

Finna okkur á:



master-care.dk