



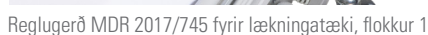

Choose quality, save money, and protect the environment.

05_20251215_IS

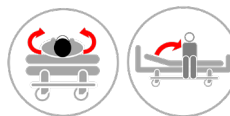

REF (Grein Ei.)	HMI Ei.	Nafn - Staðrð	UDI-DI/GTIN
MC 002-1952	80337	Quick On Stretch - 80	05744001972168
MC 002-1953	80351	Quick On Box Stretch - 80	05744001972172
MC 002-1954	81111	Quick On Stretch - 120	05744001972182
MC 002-1955	81108	Quick On Box Stretch - 120	05744001972199
MC 002-1956	81109	Quick On Stretch - 150	05744001972205
MC 002-1957	81110	Quick On Box Stretch - 150	05744001972212
MC 002-1958	100634	Quick On Stretch Left - 160	05744001972229
MC 002-1959	104990	Quick On Stretch - 180	05744001972236
MC 002-1960	104991	Quick On Stretch - 200	05744001972243
MC 002-1961	104989	Quick On Stretch - 105	05744001972250
MC 002-1964	144504	Quick On Nordic - 90	05744001975237
MC 002-1965	146620	Quick On Nordic - 120	05744001975534
MC 002-1966	146621	Quick On Nordic - 150	05744001975541
MC 002-1967	146622	Quick On Nordic - 180	05744001975558
MC 003-1952	104973	Quick On Stretch Inco - 80	05744001972434
MC 003-1954	109195	Quick On Stretch Inco - 120	05744001972441
MC 003-1964	146623	Quick On Nordic Inco - 90	05744001975565
MC 003-1965	146624	Quick On Nordic Inco - 120	05744001975572

The Original Nordic
Human Handling Concept



master-care.dk

Takk fyrir að velja vöru frá master care A/S.

Við mælum með að þú kynnis þér þessar leiðbeiningar vandlega áður en þú notar vöruna.

Upplýsingarnar með leiðbeiningunum eiga við um viðkomandi vörur, að því tilskildu að þeim hafi ekki verið breytt eða sérsníðnar, og að þær hafi verið notaðar eins og mælt er með í þessum leiðbeiningum. Ef viðskiptavinur breytir, gerir við eða notar vöruna í öðrum tilgangi en Master Care A/S ráðleggur, gildir CE - vottunin ekki lengur og ábyrgðin fellur úr gildi.

Ef vafaatriði koma upp, hafðu samband við Master Care A/S.

MDR (EU) 2017/745:

Vörur með þessum leiðbeiningum eru CE- vottaðar og fylgja samræmdum stöðlum. Þetta þýðir að vörurnar eru í samræmi við nauðsynlegar heilbrigðis- og öryggistilskipanir, og fylgja stöðlum í reglugerð um lækningatæki MDR (ESB) 2017/745 – Class 1.

Tilætluð notkun vörunnar:

Varan dregur úr núningi undir bolnum við hliðarfærslur og snúning í rúminu. Hentar notendum með verki og/eða skerta hreyfigetu í mjóðm, grindarholi og/eða baki.

Rétt notkun vörunnar:

Varan er hönnuð til notkunar á svamp- eða boxdýnu. Hún dregur úr núningi undir bók, við hliðarfærslur og snúning í rúminu.

Vísabending:

Varan hentar notendum sem eiga erfitt með að snúa sér í rúminu vegna verkja eða skerts líkamlegs atgæfis.

Frábendingar:

Ef varan minnkar ekki nægilega núning við flutning skal íhuga að skipta um snúningshjálpartæki. Það eru engar aðrar frábendingar við notkun vörunnar.

Áhættumat:

Gerðu alltaf áhættu- og færnimat á notandanum áður en varan er notuð. Þannig er notkun vörunnar, í þeim tilgangi að flytja eða færa notanda, bæði skilvirkari og traustari.

Þekking á vöru/flutningi:

Mikilvægt er að notandi vörunnar hafi fengið réttar upplýsingar um notkun hennar og lesið leiðbeiningar vandlega áður en varan er notuð. Master Care veitir fræðslu á heimasíðu sinni, og þar er að finna allar leiðbeiningar fyrir vörur okkar.

Líftími:

Áætlaður líftími vöru, með daglegu sliti og þvotti er að meðaltali 2-5 ár. Líftími vörunnar fer eftir notkun og álagi, ásamt því hversu oft hún er þvegin og þurrkuð. Vörur án nælon renniefnis hafa mun lengri líftíma.

Farga skal vörum með ófullnægjandi núningsgetu, gallaða sauma, brotið efni eða aðra annmarka. Þannig má ávallt stuðla að traustara vinnuumhverfi fyrir aðstoðarmanneskju og notanda. Athugið ástand vörunnar sem oftast og helst fyrir hverja notkun.

Ábyrgð:

Master Care A/S veitir 2 ára ábyrgð sem nær yfir efnisog framleiðslugalla, ef varan hefur verið notuð á réttan hátt.

Óviljandi mistök og meiðsli vegna rangrar notkunar á vörunni:

Ávallt skal tilkynna mistök til viðeigandi yfirvalda, til master care A/S eða dreifingaraðila.

master care A/S tekur enga ábyrgð á líkamsmeiðslum eða vörutjóni, ef varan hefur ekki verið notuð í samræmi við yfirlýstan tilgang eða samkvæmt notkunarleiðbeiningum framleiðanda.



Brugervejledning - Quick On

Montering af Quick ON cover



1. Placer lagenet med etiketten "Denne side op..." mod hovedenden.



2. Placer Quick ON på madrassen og fold stræklagnet ned omkring madrassens hjørner.



3. Placer Quick ON på madrassen og fold stræklagnet ned omkring madrassens hjørner.

Vending i seng



4. Bruger bøjer sit højre eller begge ben og tager fat i modsatte sengehest med højre hånd eller omvendt for vending til modsatte side.



5. Bruger skubber bækkenet bagud og glider om på siden ved at trække med højre arm og lade højre ben falde mod underlaget.

Op at sidde på sengekant



6. Bruger vender sig over på side og lidt frem mod kanten af sengen. Bruger eleverer sengens hovedgærde.



7. Bruger skubber fra med armene på hovedgærdet og fører samtidig benene ud over sengekanten og kommer til siddende stilling.

Brugervejledning - Quick On

Tekniske specifikationer

REF - Navn:	Størrelse:	Giddeled:	SWL:	Produktindhold:	Pakket vægt:
MC 002-1952 Quick ON Stretch - 80	L 200 x B 80 x H 15 cm	L 110 x B 60 cm	180 kg	96% Polyester, 4% Spandex.	0,70 kg
MC 002-1953 Quick ON Box Stretch - 80	L 200 x B 80 x H 25 cm	L 110 x B 60 cm	180 kg	96% Polyester, 4% Spandex.	0,90 kg
MC 002-1954 Quick ON Stretch - 120	L 200 x B 120 x H 15 cm	L 110 x B 100 cm	180 kg	96% Polyester, 4% Spandex.	0,88 kg
MC 002-1955 Quick ON Box Stretch - 120	L 200 x B 120 x H 25 cm	L 110 x B 100 cm	180 kg	96% Polyester, 4% Spandex.	1,20 kg
MC 002-1956 Quick ON Stretch - 150	L 200 x B 150 x H 15 cm	L 110 x B 130 cm	180 kg	96% Polyester, 4% Spandex.	1,02 kg
MC 002-1957 Quick ON Box Stretch - 150	L 200 x B 150 x H 25 cm	L 110 x B 130 cm	180 kg	96% Polyester, 4% Spandex.	1,20 kg
MC 002-1958 Quick ON Stretch Left - 160	L 200 x B 160 x H 25 cm	L 110 x B 60 cm	180 kg	96% Polyester, 4% Spandex.	1,10 kg
MC 002-1959 Quick ON Stretch - 180	L 200 x B 180 x H 15 cm	L 110 x B 160 cm	180 kg	96% Polyester, 4% Spandex.	1,14 kg
MC 002-1960 Quick ON Stretch - 200	L 200 x B 200 x H 15 cm	L 110 x B 180 cm	180 kg	96% Polyester, 4% Spandex.	1,38 kg
MC 002-1961 Quick ON Stretch - 105	L 200 x B 105 x H 15 cm	L 110 x B 95 cm	180 kg	96% Polyester, 4% Spandex.	0,90 kg
MC 002-1964 Quick On Nordic - 90	L 200 x B 90 x H 15 cm	L 130 x B 70 cm	180 kg	96% Polyester, 4% Spandex.	0,72 kg
MC 002-1965 Quick On Nordic - 120	L 200 x B 120 x H 15 cm	L 130 x B 100 cm	180 kg	96% Polyester, 4% Spandex.	0,78 kg
MC 002-1966 Quick On Nordic - 150	L 200 x B 150 x H 15 cm	L 130 x B 130 cm	180 kg	96% Polyester, 4% Spandex.	0,90 kg
MC 002-1967 Quick On Nordic - 180	L 200 x B 180 x H 15 cm	L 130 x B 160 cm	180 kg	96% Polyester, 4% Spandex.	1,06 kg
MC 003-1952 Quick On Stretch Inco - 80	L 200 x B 80 x H 15 cm	L 110 x B 60 cm	180 kg	5% Bomuld, 85% Polyester, 8% Polyurethane, 2% Spandex.	1,20 kg
MC 003-1954 Quick On Stretch Inco - 120	L 200 x B 120 x H 15 cm	L 110 x B 100 cm	180 kg	5% Bomuld, 84% Polyester, 9% Polyurethane, 2% Spandex.	1,30 kg
MC 003-1964 Quick On Nordic Inco - 90	L 200 x B 90 x H 15 cm	L 130 x B 70 cm	180 kg	5% Bomuld, 85% Polyester, 8% Polyurethane, 2% Spandex.	1,30 kg
MC 003-1965 Quick On Nordic Inco - 120	L 200 x B 120 x H 15 cm	L 130 x B 100 cm	180 kg	5% Bomuld, 84% Polyester, 9% Polyurethane, 2% Spandex.	1,40 kg

ADVARSLER



Efterlad aldrig bruger på produktet på sengekanten, hvis der er risiko for at bruger kan falde på gulvet.



Efterlad aldrig produktet liggende på gulvet.



Sørg for, at alle relevante bremser er låst, inden forflytning foretages.



CE-mærkning:

Produkterne er godkendt i henhold til gældende forordning for CE-mærkning og lever op til Forordning MDR (EU) 2017/745 for Medicinsk Udstyr, klasse 1.

For mere information, videoer
Quick Guide mm.,
se www.master-care.dk



Brugervægt:

Anbefalet max. brugervægt: 180 kg



Vask:

Dette produkt kan vaskes i vaskemaskine ved max. 85 °C. Lavere vaskegrader vil forlænge levetiden væsentligt. Efter vask kan produktet benyttes af andre.



Vaskemidlets pH værdi:

pH værdi for vaskemiddel / desinfektionsmiddel mellem pH 5 - 9.



Skyllemiddel:

Der må ikke anvendes skyllemiddel, da dette forringer glideegenskaberne væsentligt.



Tørretumbling:

Dette produkt må kun tørretumbles skånsomt og ved max. 40 °C. Lufttørring forlænger levetiden væsentligt.



Overfladisk rengøring:

Dette produkt kan rengøres overfladisk med klud og sæbe.



Desinficering:

Dette produkt tåler overtørring med alkoholholdige desinficeringsblandinger mellem pH 5-9.



Strygning:

Tåler ikke strygning



Kemisk rengøring:

Tåler ikke rengøring.



Blegning:

Tåler ikke blegning.



Eftersyn:

Produktet skal kontrolleres jævnlig og gerne inden hver brug. Kontroller, at der ikke er skader på stof, sømme mm. Har produktet høj friktion eller på anden vis er i stykker, skal produktet kasseres.



Brugervejledning:

Læs denne brugervejledning nøje inden ibrugtagning.



Bortskaffelse:

Sørg altid for at bortskaffe efter gældende regler.

Find os på:

