

# MADE IN EUROPE



This product has been developed and manufactured using both raw materials and with production in Europe.


Choose quality, save money, and protect the environment.

## Quick Guide


### Light Turner Sand

### Light Turner Inco


24\_260323 DK/UK

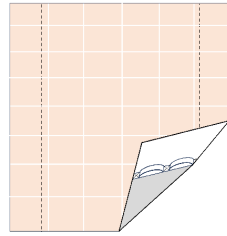

Light Turner Sand - M

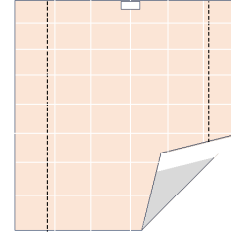

Light Turner Sand - M (no grip)

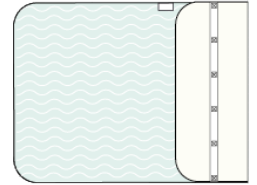

Light Turner Inco - S

REF (Vare nr./Item no.)	HMI nr./no.	Navn/Name - Størrelse/Size	UDI-DI
○ MC 002-2731	145475	Light Turner Sand - M	05744001975398
○ MC 002-2732	145476	Light Turner Sand - M (no grip)	05744001975404
○ MC 002-2727	147223	Light Turner Inco - S	05744001974353
○ MC 002-2728	147224	Light Turner Inco - M	05744001974360

#### Erklæret formål:

Formålet er at nedsætte friktionen mellem bruger og madras, for at gøre det let for hjælper og skånsomt for bruger at foretage vendinger, forflytte op-/ned i sengen og forflytte til sengekant. Produktet skal altid bruges i kombination med et Silkelagen fra master care A/S.

#### Intended use:

The intended use for the product is to reduce friction between the user and the mattress to make it easier for the helper and gentler for the user whilst turning, moving up/ downwards, and moving to sitting position on the edge of the bed. This product should always be used in combination with a Satin Sheet from master care a/s. Combined the two products have 4-way-glide.

#### Eftersyn:

Produktet skal kontrolleres jævnlig og gerne inden hver brug. Kontroller, at der ikke er skader på stof, stropper, sømme mm. Har produktet høj friktion eller på anden vis er i stykker, skal produktet kasseres.

#### Maintenance:

Make visual inspections frequently and preferably before every use. Pay attention to torn fabric, seams and straps. Products with high friction or other deficiencies must be discarded.




**(DK)** Efterlad aldrig bruger på produktet på sengekanten.

**(UK)** Never leave the user on the product when lying on the edge of the bed.



**(DK)** Efterlad aldrig produktet liggende på gulvet.

**(UK)** Never leave the product on the floor.

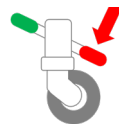

**(DK)** Sørg for, at alle relevante bremses er låst, inden forflytning foretages.

**(UK)** Make sure that all relevant brakes are activated before transferring the user.



**(DK)** Sørg altid for, at brugeren ikke hænger fast i stropperne.

**(UK)** Always make sure that the user is not caught in the straps.



**(DK)** Forordning MDR 2017/745 for medicinsk udstyr klasse 1  
**(UK)** Regulation MDR 2017/745 for medical devices class 1  
 ISO 12 31 03 21



The Original Nordic Human Handling Concept



master care A/S, Sofienlystvej 3, 8340 Malling, Danmark  
 Tlf. +45 86 93 85 85, E-mail: info@master-care.dk

**(DK)** Vi tager forbehold for evt. trykfejl og mangler.  
**(UK)** Reservations are made for printing errors.

